

LumboTrax™ rehabilitační přístroj na bederní páteř

Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtete tento návod a důkladně mu porozumějte. Ušchovejte si tento návod pro budoucí použití. **POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno k poskytování relaxační masáže doma, ne pro lékařské účely.**

ČÁSTI PRODUKTU



1. Vibrátor
4. Airbag

2. Topná fólie
5. Ovládací panel

3. EMS podložky
6. Podložka na měkké povrchy



ADAPTÉR

Adaptér se hodí pro váš místní napájecí standard.




SPRÁVNÁ POLOHA PRO PROVOZ

- Pohodlí je nejdůležitější
- Umístěte zařízení pod bedra
- Umístěte zařízení na tvrdý povrch nebo pod něj použijte podložku, aby se zařízení udrželo ve vodorovné poloze

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Vyhřívací podložka automaticky upraví teplotu podle svých pracovních podmínek (užívejte bez nebo s oblečením). Při použití s oblečením bude teplota vyšší.
2. Zařízení je vybaveno systémem automatické indukce teploty. Nepřepínejte na dotyk přímo s kůží ihned během dotykové práce s oblečením, abyste předešli jakémukoli nepohodlí způsobenému vysokou počáteční teplotou.

ELEKTRODOVÁ MASÁŽ

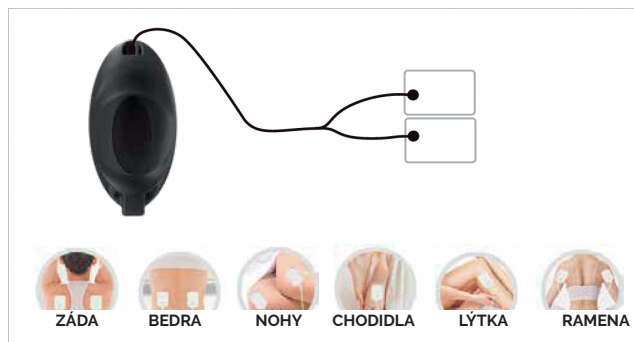

1. Vložte kabel do výstupního portu elektrického impulsu zařízení, připojte patku a odstraňte ochrannou fólii, abyste nalepili na místo, kde je potřeba masáž, jako jsou ruce, nohy, pas atd.
2. Po ukončení použití nalepte ochranný papír na náplast Electric pulse, abyste ji mohli příště použít.

Tipy: Elektrická pulzní náplast je spotřební položkou, v případě potřeby ji zakupte

Upozornění: Nepoužívejte funkci EMS a extra elektrodové podložky současně.

FUNKCE

- Metoda dynamického protažení
- Nastavitelná úroveň teploty (Nízká / Střední / Vysoká)
- Vibrační masáž


POZNÁMKA

- Výchozí doba tepelné terapie je 15 minut. Po 10 minutách odpočinku znovu stiskněte tlačítko On/Off na ovládacím panelu, pokud potřebujete více cyklů.
- V jiném režimu budou některá tlačítka pro různé funkce zablokována.
- Pokud trpíte diabetem nebo hypertermalgezií, toto zařízení pro Vás není vhodné.



ZÁKLADNÍ DESKA

1. Základní deska musí být umístěna pod zařízením
2. Deska byla navržena tak, aby zlepšila celkový efekt při používání trakčního zařízení na měkkém povrchu, jako je měkká postel, pohovka nebo pěnová gumová poduška. (Viz obrázek).
3. Zařízení můžete používat s deskou nebo bez ní, když je zařízení umístěno na tvrdém povrchu.
4. Nešlapejte na desku ani ji nepoužívejte k jiným účelům.
5. Upravte podložku podle své osobní preference. Síla bude střední, když je zařízení položeno na straně A. Síla bude silnější, když je zařízení položeno na straně B.

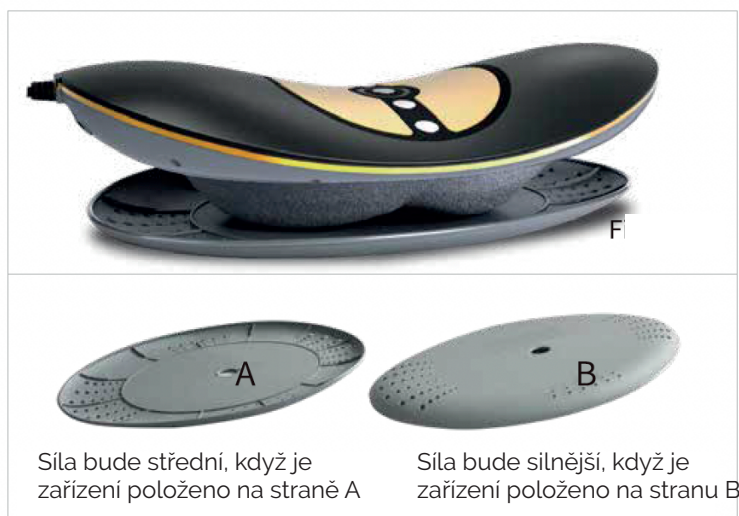

Na pohovce



Na měkké posteli

KONTRAINDIKACE

1. Používejte pouze adaptér, který byl dodán se zařízením.
2. Nenechávejte zařízení spadnout z vysokých míst a neuchovávejte jej v blízkosti ostrých předmětů.
3. Nepoužívejte tento výrobek, když spíte.
4. Nepoužívejte současně jiná lékařská elektronická zařízení, jako jsou kardiostimulátory, přístroje srdce-plíce nebo elektrokardiografy, protože by to mohlo být nebezpečné. Pokud pacient současně používá vysokofrekvenční chirurgické zařízení nebo jiné související zařízení, mohou elektrické pulzní náplasti v zařízení způsobit popáleniny nebo poškození zařízení. Pokud je zařízení používáno v blízkosti mikrovlnné trouby, může být výstup zařízení nestabilní.
5. Před použitím tohoto zařízení se poraďte se svým lékařem, zvláště pokud jste těhotná, máte citlivou kůži, srdeční onemocnění, abnormality krevního tlaku, zhoubné nádory, cerebrovaskulární onemocnění, cukrovku atd.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Při použití funkce elektrického impulsu nehybejte ani neměňte polohu.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě bez vlhkosti.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako rukojeť.
- Uchovávejte mimo dosah všech rozpouštědel a drsných čisticích prostředků.
- Před čištěním odpojte zařízení a nechte jej vychladnout. Podle potřeby otřete měkkým suchým hadříkem.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- K čištění masážního přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštidla na sklo/nábytek ani ředidlo.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Chcete-li vybrat správné místo pro provoz, prostudujte si část "SPRÁVNÁ POLOHA PRO PROVOZ" na straně 1. Zapnutí/vypnutí a přepínač režimů Stisknutím tlačítka 15 zapnete zařízení a přepnete do manuálního režimu. Dotkněte se tlačítka AUTO pro přepínání mezi Auto 1, Auto 2 a Manuálním režimem. Stisknutím a podržením vypnete.

Manuální režim

A- Dynamic Back Stretching Air

Stisknutím a podržením tlačítka nafouknutí spustíte protahování zad, pasu se zvedne. Tlačítko uvolníte, jakmile dosáhnete požadované pohodlné výšky. Dalším stisknutím tlačítka tlak uvolníte.

B- Vibrační masáž

Klepnutím na tlačítko Vibrace zapnete vibrační masáž a přepnete mezi nízkou, střední, vysokou intenzitou a vypnutím.

C- Topení

Klepnutím na tlačítko Heat zapnete režim vytápění a přepnete mezi nízkou, střední, vysokou teplotou a vypnutím.

D- Elektrická stimulace svalů

Stisknutím tlačítka režimu EMS zapnete EMS a přepnete mezi režimy 1, 2, 3 a vypnete. Dotkněte se EMS pro zvýšení intenzity, EMS pro snížení. Úroveň intenzity bude přítomna na obrazovce 20. 20 je nejvyšší intenzita.

Automatický režim

A- AUTO Režim 1 (Dynamické protahování zad + vibrace).

V tomto režimu můžete nastavit zahřívání a EMS, natahování a vibrace poběží automaticky.

B- Auto Režim 2 (Dynamické protahování zad + vyhřívání + EMS).

V tomto režimu můžete upravit všechny funkce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: ABS + PC

Napájení: 12V 110-240V AC/DC adaptér

Rozsah teplot ohřevu: 45°C–65°C

Rychlost vibrací: 3000RPM/min

Délka kabelu adaptéru: 1,5 m

Velikost produktu: 48×26 cm

Automatické cykly: 15 minut

Hmotnost produktu: 1180 g