

Kontraindikace

1. Nepoužívejte výrobek v místech s vysokou teplotou, hořlavostí, elektromagnetickým zářením a vlhkostí.
2. Nepoužívejte tento výrobek za bouřky nebo blesku.
3. Bez povolení výrobek nedemontujte, neopravujte ani neupravujte, což by mohlo způsobit nehody nebo poruchy.
4. Tento výrobek není vodotěsný, nepoužívejte jej, pokud do něj vnikne voda.
5. Nepoužívejte jej pro kojence, osoby s úrazem hlavy nebo osoby, které nedávno podstoupily operaci hlavy.
6. U pacientů s hlubokou mozkovou příhodou a hypertenzí, používejte přístroj prosím s opatrností a poraďte se s odborným lékařem. Pokud se cítíte nekomfortně při nebo po používání, zastavte přístroj.
7. Používejte s opatrností u osob se zpomaleným pohybem, tělesnými a duševními poruchami nebo mentální retardací, Používejte prosím pod dohledem doprovodu. I pokud se cítíte nepříjemně v průběhu masáže, okamžitě přestaňte přístroj používat.
8. Vyvarujte se používání masáže, když se necítíte dobře nebo jste nemocní.
9. Tento výrobek je osobním zdravotnickým prostředkem, který nemůže nahradit léky a lékařské vybavení.
10. Tento výrobek je elektronickým prostředkem pro péči o zdraví v domácnosti, který není vhodný pro diagnostiku, léčbu a další komerční účely.


Varování

Následující skupiny osob jsou rizikové: kojenci, osoby s úrazem hlavy, osoby po nedávné operaci hlavy

Údržba

Nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Čištění výrobků by se mělo provádět ve vypnutém stavu, přístroj by se měl po použití umístit na bezpečné místo.

Jalumalu Octopus™ Masážní přístroj na hlavu

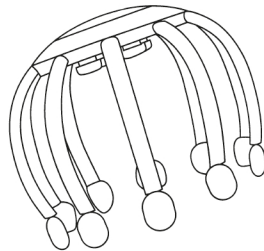

Uživatelský manuál

Pro zákazníky

Děkujeme, že jste si zakoupili náš masážní přístroj na hlavu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro další použití.

Obecné informace o produktu

V souladu s fyziologickými vlastnostmi hlavy člověka používá masážní přístroj metodu bodové masáže. Deset masážních bodů rozmístěných kolem hlavy spolu s různými frekvencemi vibrací motorů vytváří relaxační a nový způsob masáže. Přístroj je jednoduše ovladatelný.

Balení obsahuje:



Masažér hlavy



Nabíjecí kabel



Uživatelský manuál

Parametry produktu:

Název výrobku: Jalumalu Octopus™ Masážní přístroj na hlavu

Velikost produktu: 17,68*12*12cm

Materiál: Materiál: ABS + silikon

Napětí: SV=

Kapacita baterie: 1100mAh

Parametry produktu

Multifunkční tlačítko
VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
NASTAVENÍ MASÁŽE

Masírující body

Masírující body



Nabíjecí USB vstup



Nabíjecí USB kabel

Jak používat přístroh

1. Dlouhým stisknutím (3 sekundy) hlavního tlačítka zařízení zapnete.
2. Krátkým stisknutím hlavního tlačítka přepínáte 4 masážní režimy.

1. RELAXAČNÍ MASÁŽ

3. HLOUBKOVÁ MASÁŽ

2. UVOLŇUJÍCÍ MASÁŽ

4. DYNAMICKÁ MASÁŽ

Pro různé režimy existují také různé metody masáže a intenzita vibrací. Navolte si prosím perfektní masáž podle svých potřeb.

3. Výrobek se automaticky vypne po 15 minutách provozu. Nebo jej můžete kdykoliv vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení.

Nabíjení

1. Když je baterie vybitá, indikátor začne červeně blikat.
2. Během nabíjení indikace stále bliká. Při plném nabití se indikace zbarví modře.
3. Doba nabíjení: Přibližně 3 hodiny
4. Přístroj je napájen lithiovou baterií.

1. Okolní teplota: -20°C - +40°C

2. Atmosférický tlak: 860hpa~ 1060hpa

3. Relativní vlhkost: ::s::so%

4. Místo, kde přístroj používáte by mělo být dobře větrané, aby se zabránilo vnikání silného světla a korozivních plynů.

5. Přeprava: výrobek je vybaven jednoduchými opatřeními proti nárazu, je vhodný pro leteckou, železniční, dálniční a kyvadlovou přepravu, měl by se vyvarovat dešti, sněhové tříšti, převrácení a nárazu.

6. Pokud je doba skladování delší než 3 měsíce, je třeba stroj před použitím zkontrolovat a nabít.